

SYRIUX

Essential



DIÁLISIS, CONSULTORIOS Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Ref. 4318



@mubimedical
www.mubimedical.com



COMODIDAD Y DINAMISMO

Una solución versátil que se adapta a diversas unidades médicas para procedimientos y atención. Estructura que posibilita múltiples posiciones que liberan la zona lumbar del paciente, pasando de posición silla a inclinación *trendelenburg *horizontal con sencillos y cortos pasos, brindando confort al paciente durante la atención.


DISEÑO Y SEGURIDAD

Syriux Essential, ha sido diseñada bajo los más altos estándares de calidad, mejorando la prestación del servicio asistencial.

Proteja sus pacientes mientras protege su ROI con productos hospitalarios que garantizan una atención cómoda, segura y de calidad.

SUPERFICIE DE PACIENTE

De tres secciones: una fija y dos móviles, se adapta a los movimientos de la silla, soporta al paciente durante procedimientos y tratamientos en unidades hospitalarias y consultorios.

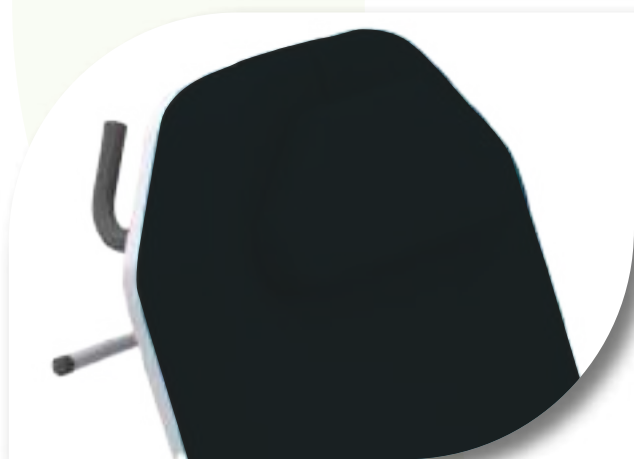

REPOSA CABEZA

Brinda soporte a la cabeza del paciente, permite ajustar la altura para adaptarse a cada individuo, acolchada y removible en caso de no requerir su uso.



APOYA BRAZOS

Brindan comodidad durante los tratamientos y procedimientos, abatibles facilitando ingreso y salida segura del paciente, fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial resistentes a protocolos de desinfección.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO



AJUSTE ESPALDAR Y PIECERO

Movimientos asistidos por amortiguador neumático y manijas bilaterales en sección espaldar y piecero, ágil y seguro para ajustar la silla en las posiciones requeridas, facilitando la labor del personal asistencial y mejorando la experiencia del paciente.

PORTA SUERO INOX

Desmontable. Con gancho de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).



MANILAR DE EMPUJE

Facilita la movilidad de la silla por diferentes ambientes, ergonómicas, ubicadas en el espaldar de la silla.

*PORTA ROLLO

Permite ubicar rollo de tela quirúrgica para protección de la superficie paciente.



RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de mantenimiento, pestaña retráctil en cada rueda para activar freno, minimiza el riesgo de lesiones por caídas durante el ingreso y egreso del paciente.

SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio. De fácil configuración, posiciones que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.



Flexión espalda



Flexión pies






Silla



Horizontal

DIMENSIONES *

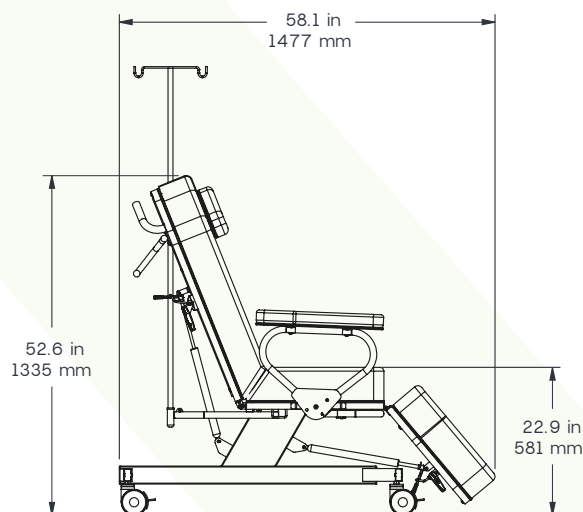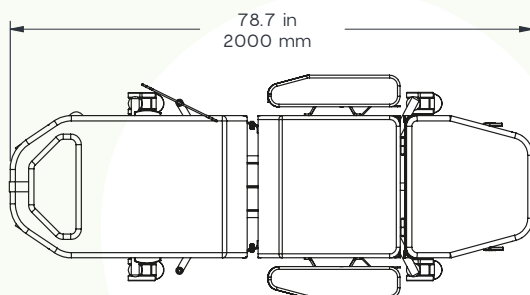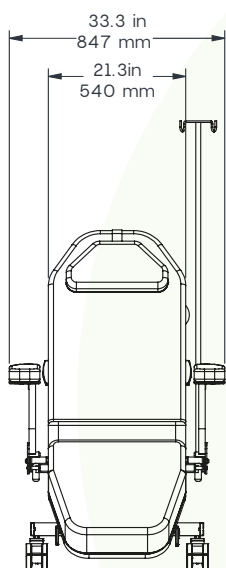

DIMENSIONES EXTERNAS *

Largo	78.7 in (2000 mm)
Ancho	33.3 in (847 mm)

SUPERFICIE DE PACIENTE (útiles) *

Largo	78.7 in (2000 mm)
Ancho	21.3 in (540 mm)

MOVIMIENTOS *

Flexión espalda	0° a 78°
Flexión pies	0° a -46°

*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).


COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.



OPCIONES DE COLOR*

Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.



AZUL
REY



BRAVIA
MORA



GRIS



NARANJA



NEGRO



TURQUESA



VERDE
MANZANA

* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.

* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.

* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR *

- Manijas bilaterales en polímero para asistir movimientos de: espalda, pies y silla.
- Movimientos realizados por amortiguadores neumáticos.
- Capacidad de carga segura 396 lb (180 kg).
- Superficie de paciente de 3 secciones, una fija y 2 móviles, fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad sobre bastidor de madera, cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial resistente a protocolos de desinfección.
- Reposo cabeza ajustable y apoya brazos abatibles de accionamiento con una mano, facilita el ingreso y salida segura del paciente, fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial.
- Asas de empuje e espaldar que facilita el desplazamiento de la silla.
- Soporte porta rollo de tela quirúrgica.
- Porta suero fijo en acero inoxidable con ganchos de servicio, capacidad carga 17.6 lb (8 Kg).
- Soportes para ubicar porta suero en ambos lados de la silla.
- Ruedas doble rodaja en poliuretano de 4 in (101.6 mm) libres de mantenimiento.
- Pestaña retráctil en cada rueda para activar freno.

FABRICACIÓN Y ACABADO **

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

NOTA

*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

**El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



@ m u b i m e d i c a l – info@mubimedical.com – www.mubimedical.com

ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Ingeniería	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN:
-------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

