



Laerdal
helping save lives



Brindando capacitación realista y asequible en la atención materna y del recién nacido

Simulador de Parto MamaNatalie

Incluye el Simulador de recién nacido NeoNatalie



www.laerdal.com/la/mamanatalie

El simulador de partos **MamaNatalie** y su bebé recién nacida, NeoNatalie, ayudarán a introducir la simulación en sus programas educativos. El realismo de los simuladores amigable con el usuario y los atractivos juegos de rol harán que las sesiones de aprendizaje sean eficientes e inolvidables, tanto para los estudiantes como para los facilitadores.

Capacitación realista para controlar la hemorragia posparto (una de las causas principales de muerte materna): MamaNatalie le permite simular un sangrado de hasta 1,5 litros y manipular fácilmente la condición del útero (desde pantanoso hasta bien contraído y cualquier condición intermedia) en respuesta a las acciones del estudiante.

Altamente asequible portátil y fácil de usar: MamaNatalie ofrece flexibilidad a un costo razonable. MamaNatalie es excelente para capacitar en una variedad de ambientes educativos y de atención de la salud, incluyendo capacitación con base en la comunidad o móvil, capacitación in-situ o en equipo en rotaciones clínicas.

Mejora las habilidades de comunicación: Usado por el instructor, el simulador de partos MamaNatalie es único en cuanto a su capacidad para facilitar el desarrollo de habilidades de comunicación interactivas para evaluar, interpretar e indicar el tratamiento correcto.

MamaNatalie admite objetivos de aprendizaje:

- Sonidos cardíacos fetales simulados
- Posicionamiento fetal: posiciones de parto normales y anormales
- Intervenciones por: distocia de hombro, eclampsia
- Parto con instrumentos, prolapso del cordón
- Cateterización de orina
- Atención posparto: evaluación fúndica y cuidados, masaje bimanual para incluir manejo de útero atónico / pantanoso
- Alumbramiento de la placenta (completa o parcial)
- Hemorragia posparto: tanto intensidad de sangrado como volumen
- Terapia con medicamentos

El instructor o estudiante se coloca el simulador, y controla manualmente:

- Proceso de parto
- Sonidos cardíacos fetales
- Alumbramiento de la placenta
- Posicionamiento fetal
- Firmeza uterina
- Intensidad de sangrado y volumen de pérdida de sangre





NeoNatalie admite objetivos de aprendizaje:

Características de las vías aéreas:

Posicionamiento del recién nacido para simular apertura de la vía aérea mediante inclinación de cabeza. Ventilación con presión positiva e inserción de tubo orogástrico

Características de la respiración:

Elevación visible del pecho con la inflación adecuada

Características cardíacas:

Compresión manual del pecho a la profundidad y fuerza adecuadas para corregir la práctica de habilidades

Características de la circulación:

Pulso umbilical simulado

MamaNatalie tiene características únicas para la capacitación en comunicación y capacitación en el control de la hemorragia posparto

Placenta

Alumbrada completa, parcialmente retenida o completamente retenida.

Útero

Contiene al bebé, la placenta y el cordón umbilical. Firmeza uterina controlable, desde atónica hasta completamente contraída.

MamaNatalie

Reserva de sangre

Contiene hasta 50,7 onzas - válvula para regular la intensidad del sangrado y escala para medir la pérdida de sangre total.

Cordón umbilical


Se conecta al simulador del bebé
Pulso palpable
Complicaciones del cordón.

Vejiga urinaria

Permite la cateterización.

Recto

Permite la administración de medicamentos.

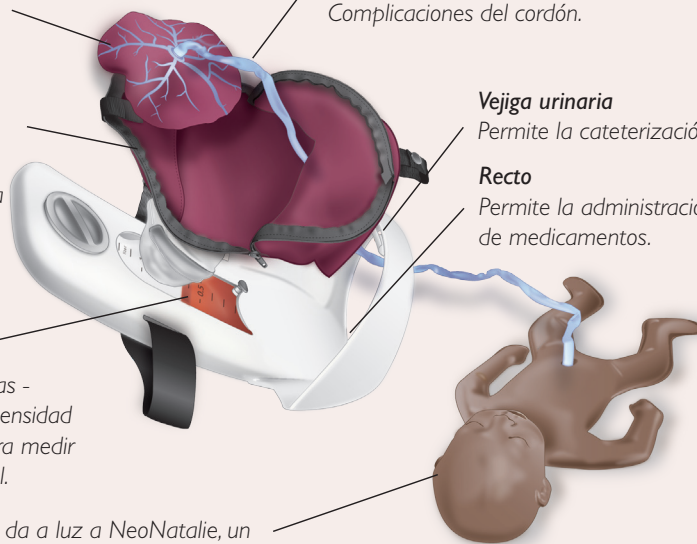


MamaNatalie da a luz a NeoNatalie, un simulador de recién nacido altamente realista. NeoNatalie tiene tamaño y apariencia realistas, y también un peso, sensación y tacto naturales cuando se la llena con agua tibia.

NeoNatalie



Monitoreo de ritmo cardíaco fetal

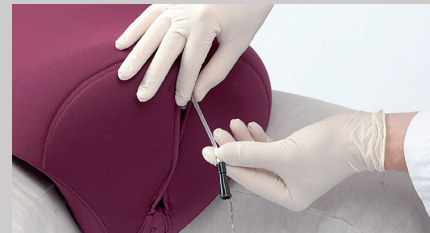

Cateterización de vejiga urinaria



Parto con presentación de nalgas



Parto con vacío



Inyección de oxitocina



Tracción de cordón controlada



Placenta incompleta

Demostración en video disponible en:
www.laerdal.com/la/mamanatalie



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MamaNatalie viene con el simulador de recién nacido NeoNatalie con tono de piel oscura o clara.
El modelo de MamaNatalie completo comprende:

Simulador de parto MamaNatalie

- Placenta con cordón umbilical
- Concentrado de sangre
- Succión para NeoNatalie
- 2 pares de guantes que no contienen látex
- Estetoscopio fetal
- Bandeja para recolección de fluidos
- Drenaje de fluidos
- Catéter para orina
- Jeringa de 20 ml
- Cráneo de Neonatalie con fontanelas
- Mochila
- Instrucciones de uso

Simulador de recién nacido NeoNatalie

- Peras de compresión para simulación de llanto al nacer; respiración espontánea, pulso umbilical palpable y auscultación de sonidos cardíacos
- Cordón umbilical externo y 2 lazos umbilicales
- Paños para simular toallas
- Gorro para cabeza
- Estuche para almacenamiento/traslado
- Instrucciones de uso



MamaNatalie viene con un bolso para transportarla cómodamente.

No. de Cat.	Título	Incluye
340-00233	MamaNatalie Completo (oscuro)	Simulador de recién nacido NeoNatalie con piel marrón
340-00333	MamaNatalie Completo (claro)	Simulador de recién nacido NeoNatalie con piel blanca

Compre uno, regale uno

Mira (20) y Shifa sobrevivieron a una severa complicación durante el parto gracias a la presencia de un asistente de parto bien capacitado



350.000 madres y casi 2 millones de bebés mueren cada año durante el parto.
El 99 % de estas muertes ocurre en países en vías de desarrollo.

Por cada MamaNatalie comprada durante 2012, Laerdal donará una MamaNatalie adicional a programas de salud global en países en vías de desarrollo.

+55 11 4193 8007
www.laerdal.com/la